

## VASCA HERA

### *Vasca in poliestere rinforzato*

- Con fibra di vetro e rivestimento igienico in Gelcoat.
- Corpo vasca con schienale di forma anatomica, appoggiatesta rialzato e scanalatura sul sedile per il deflusso dell'acqua.
- Riempimento vasca azionabile tramite tasto sul pannello comandi.
- Comando delle funzioni elettroniche tramite tastiera elettronica sul quadro comandi con controllo della funzione attivata.
- Insegna dei codici guasti sul display.
- Regolazione temperatura con miscelatore termostatico ¾ " con indicazione digitale della temperatura dell'acqua.
- Bloccaggio della porta di chiusura laterale tramite motore elettrico.
- Un sistema di sicurezza consente l'apertura della porta in ogni momento in caso d'emergenza. In caso di mancanza di corrente il sistema di sicurezza viene alimentato da una batteria incorporata.
- Doccia azionabile tramite tastiera sul quadro comandi, con valvola autobloccante e tubo colore bianco. Agganciabile al bordo vasca.
- Base con piedini regolabili in altezza, zincati e ricoperti con strato in polvere di poliestere secondo tabella colori RAL, antigraffio e antiurto.
- Attacchi acqua calda e fredda 3/4"
- Scarico DN 50
- 230 V/50 Hz
- Altezza totale 970 mm
- Altezza vasca 690 mm
- larghezza vasca 760 mm
- lunghezza vasca 1510 mm
- larghezza porta laterale 780 mm
- Altezza seduta 520 mm
- Altezza entrata 210 mm
- Capacità vasca ca. 160 lt.




#### ACCESSORI

##### Impianto disinfectante:

- Doccia disinfectante, azionabile tramite tastiera sul pannello comandi, con tubo col.rosso e valvola autobloccante.
- Spia luminosa in mancanza di liquido disinfectante.
- L'impianto disinfectante é adatto per contenitori da 5 lt di uso commerciale.
- Con la vasca riempita l'impianto disinfectante é disattivato per motivi di sicurezza.

##### Idromassaggio:

- Sistema dei getti brevettato, senza tubazioni, autoscaricamento elettronico e disinfectabili singolarmente.
- 2 getti integrati sul lato piedi, senza tubazioni (per questo assolutamente igienico), azionabili dalla tastatura sul pannello comandi.
- Direzione ed intensità dei getti regolabili.
- Livello riempimento vasca automatico.
- Il riempimento vasca , azionabile tramite tastatura sul quadro comandi, avviene automaticamente fino al livello preimpostato. L'arresto dell'afflusso d'acqua è possibile in ogni momento.

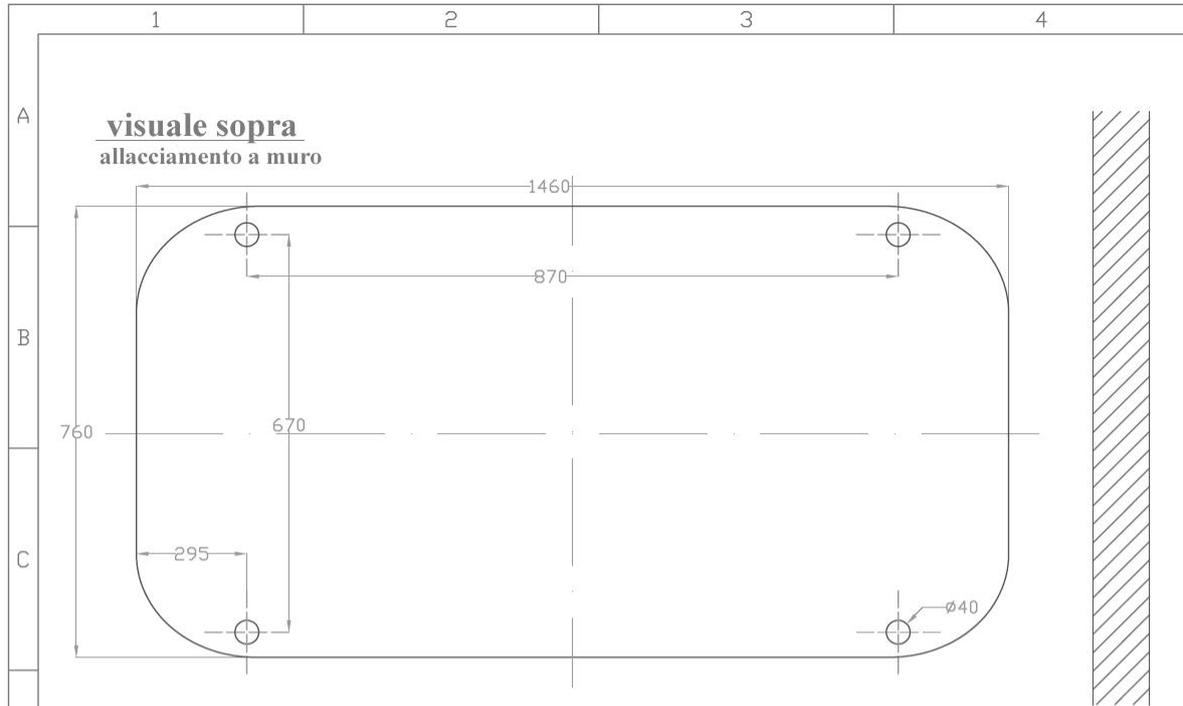

### Dati tecnici per vasca da seduta Hera

- AF:** collegamento acqua fredda, raccomandato 18l/min, 2-5 Bar  
allac. su imp. predisposti: valvola di chiusura, pezzo di raccordo R1/2" pollici filetto interno, scarico verticale
- AC:** collegamento acqua calda, raccomandato 18l/min, 2-5 Bar  
allac. su imp. predisposti: valvola di chiusura, pezzo di raccordo R1/2" pollici filetto interno, scarico verticale
- E :** connessione elettrica  
allac. su imp. predisposti: spruzzi d'acqua presa a connessione fissa 1,5x3mm2 230V-50Hz, seguendo VDA 0180DIN 57100, protezione 10A interruttore automatico-FI corrente di dispersione max mA compensazione potenziale segue VDE 0107
- DN 50 :** allacciamento su impianti predisposti: muffa di raccordo DN50
- misure di protezione:** interruttore acqua calda e acqua fredda

<p align="center"><b>Hera</b> piano di collegamento vasca seduta</p>		scala 1 : 20	pagina 1
		<p align="center">stato attuale: settembre 2006</p>	
1	collegamento acqua calda R1/2" pollici		
2	collegamento acqua fredda R1/2" pollici		
3	muffa a innesto DN50		
4	connessione-E 230V / 50Hz		
5	compensazione potenziale		

